

Tom 2



plus de joie pour les petits patients

Avantages de Tom 2



360°
sécurité



- Sécurité maximale pour les patients pédiatriques
- Design chaleureux



Patient

- Lit entièrement électrique
- Accès aisé au patient



Personnel

- Design exceptionnel et moderne du lit pour enfants
- Niveau de soins pédiatriques supérieur



Direction

Sécurité totale



PANNEAUX DU LIT AMOVIBLES

- Accès complet au patient - Disponible en version US!
- Verrouillage magnétique unique des panneaux du lit.
- Panneau haut et résistant.



BARRIÈRES LATÉRALES TÉLESCOPIQUES

- Déverrouillage des barrières latérales en toute sécurité grâce aux deux barres ergonomiques.
- Conçu en conformité avec les normes de sécurité.






PROTECTION SUPÉRIEURE

- Fonction de protection unique et amusante.
- Barrière de sécurité innovante au-dessus de la tête.



PAS D'OUVERTURE

- La translation de la partie buste permet de maintenir en permanence un écart de sécurité entre le relève-buste et la tête de lit.
- Les principes de positionnement ergonomique sont maintenus.

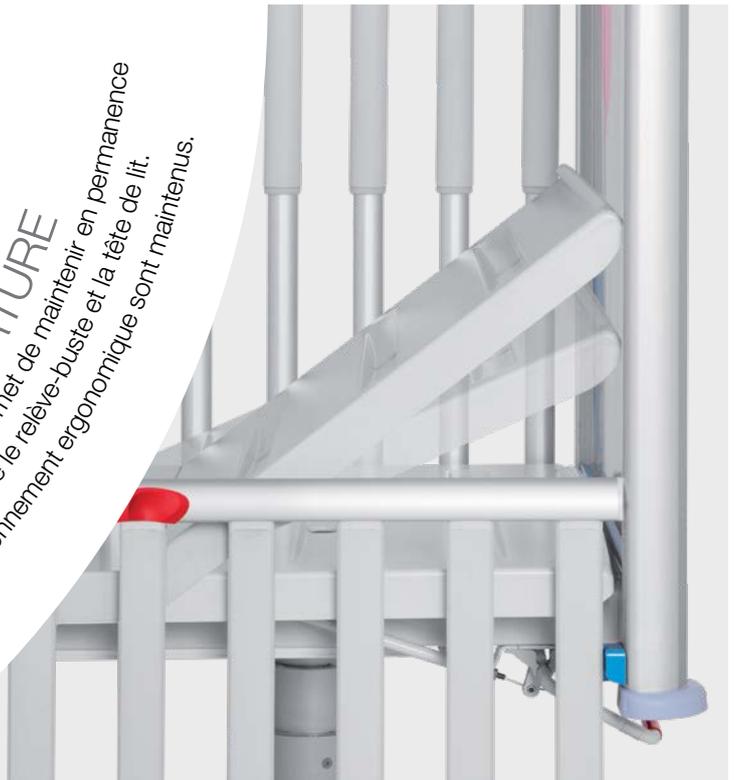

Pour se sentir bien





DESIGN MODERNE UNIQUE

Les panneaux du lit transparentes permettent à l'enfant d'être en contact permanent avec l'environnement : les parents et les soignants sont toujours à proximité. Les motifs colorés des panneaux du lit illustrent parfaitement l'univers joyeux des enfants.



- SOMMEIL PAISIBLE
- SENTIMENT DE SÉCURITÉ



- PARFAITE VUE D'ENSEMBLE

Conçu pour les enfants



Lignes épurées, matériaux modernes et couleurs vives caractérisent l'aspect du lit Tom 2 en créant un cadre agréable et sécurisant pour les enfants hospitalisés et leurs parents.



Garder le sourire pendant



les soins



BARRIÈRES LATÉRALES TÉLESCOPIQUES EXCLUSIVES

- Le meilleur accès possible aux patients pédiatriques.
- 5 hauteurs possibles à ajuster selon les besoins.



◀ 80_{cm} **Maximale**
SÉCURITÉ

◀ Position
intermédiaire


◀ 40_{cm} **Meilleure**
VUE

◀ Position
intermédiaire

◀ 0_{cm} **Facilité**
ACCÈS

Espace dégagé
et sûr sous
les barrières
latérales quelle
que soit leur
position.

◀ 13_{cm}

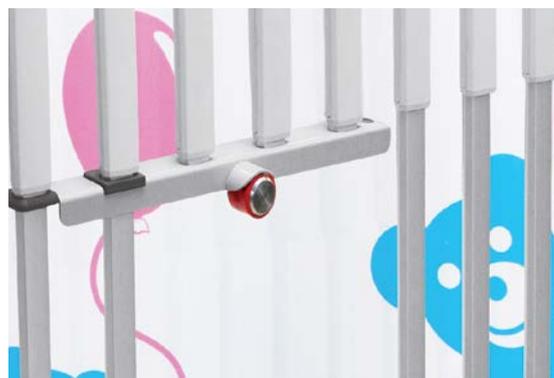

OUVERTURES AU NIVEAU DES BARRIÈRES LATÉRALES

Pour une utilisation pratique
en soins pédiatriques.

Positionnement confortable



POSITIONNEMENT ÉLECTRIQUE

La hauteur du lit, l'inclinaison du relève-buste et la position TR/ATR peuvent être réglées à l'aide du panneau de commande. Le bouton GO ou le bouton STOP permettent d'activer le verrouillage de sécurité du lit contre les mouvements accidentels.

Confortable
EXAMEN

83_{cm} ▶

SORTIE DU LIT
SÉCURISÉE

58_{cm} ▶

LA CONSTRUCTION EN COLONNE

est l'une des caractéristiques distinctives du lit, permettant le réglage de la hauteur. Elle assure une stabilité et une hygiène parfaites et un accès sans restriction à toutes les parties du lit.



Détails pratiques

- 1 Veilleuse de nuit
- 2 Supports pour accessoires
- 3 Boîte de rangement
- 4 Rails pour accessoires
- 5 Tige porte-sérum télescopique intégrée
- 6 Freins centralisés
- 7 CPR manuelle
- 8 Bandeau de commandes soignant





PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Alimentation	230V/±10 %
Entrée maximale	max 1,6A ; 370VA
Protection contre l'eau et la poussière	IPX4

CERTIFICATS

LINET est certifiée conformément aux normes et au système de qualité européens : ČSN EN 9001:2009, ČSN EN 13485:2012

Le lit Tom 2 est pleinement conforme à la nouvelle norme pour les lits médicalisés pour enfants. DIN 32623:2009-11 et sa construction garantissent une parfaite protection contre les chutes chez les enfants. Autres normes : EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Dimensions externes	159.8×83 cm
Dimensions recommandées du matelas	142×70/10 cm
Charge maximale d'utilisation	75 kg
Hauteur de la plate-forme de matelas (min-max) (à réglage électrique)	58 cm–83 cm
Inclinaison TR/ATR (à réglage électrique)	15°/15°
Hauteur max. des barrières latérales	80 cm
Relève-buste autorégressif	11 cm
Section de la plate-forme de matelas	2
Espace maximal entre le relève-buste et la tête de lit	2.5 cm
Poids (selon l'équipement)	120 kg
Espace libre	13 cm
Angle maximal du relève-buste (à réglage électrique)	40°
Commande centrale des roulettes	OUI



TOM 2

Patient

- Sécurité maximale pour les patients pédiatriques
- Design chaleureux



- Lit à actionnement entièrement électrique
- Accès aisé au patient



Personnel

Direction

- Design exceptionnel et moderne du lit pour enfants
- Niveau de soins pédiatriques supérieur



Members of LINET Group

LINET FRANCE

7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | FRANCE
Tél. : 02 47 80 31 80 | Fax : 02 47 80 31 81 | E-mail : info@linet.fr | www.linet.fr

